

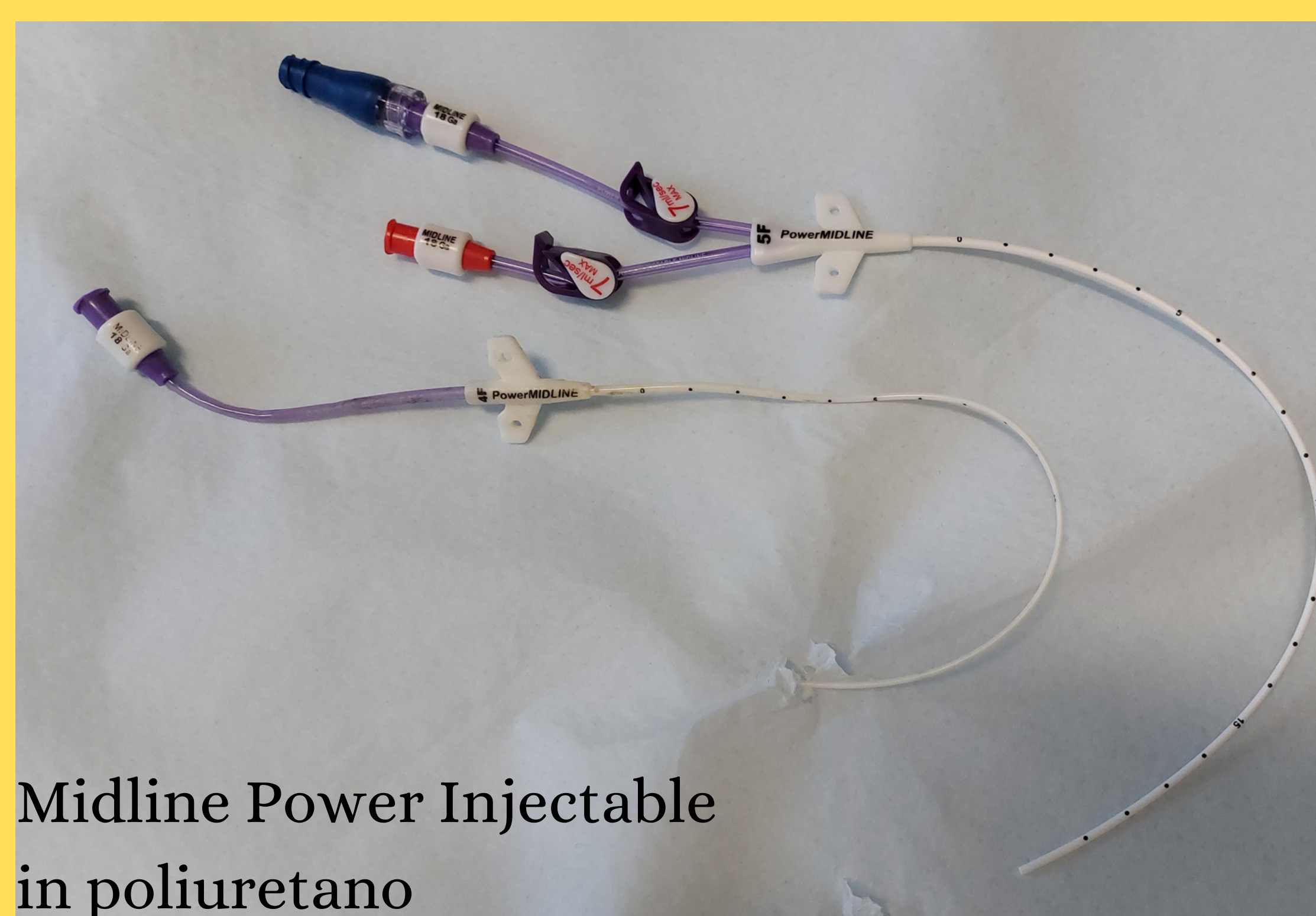


## DISPOSITIVI VENOSI CHE TOLLERANO

## IL MEZZO DI CONTRASTO con pompa per infusione ad alti flussi

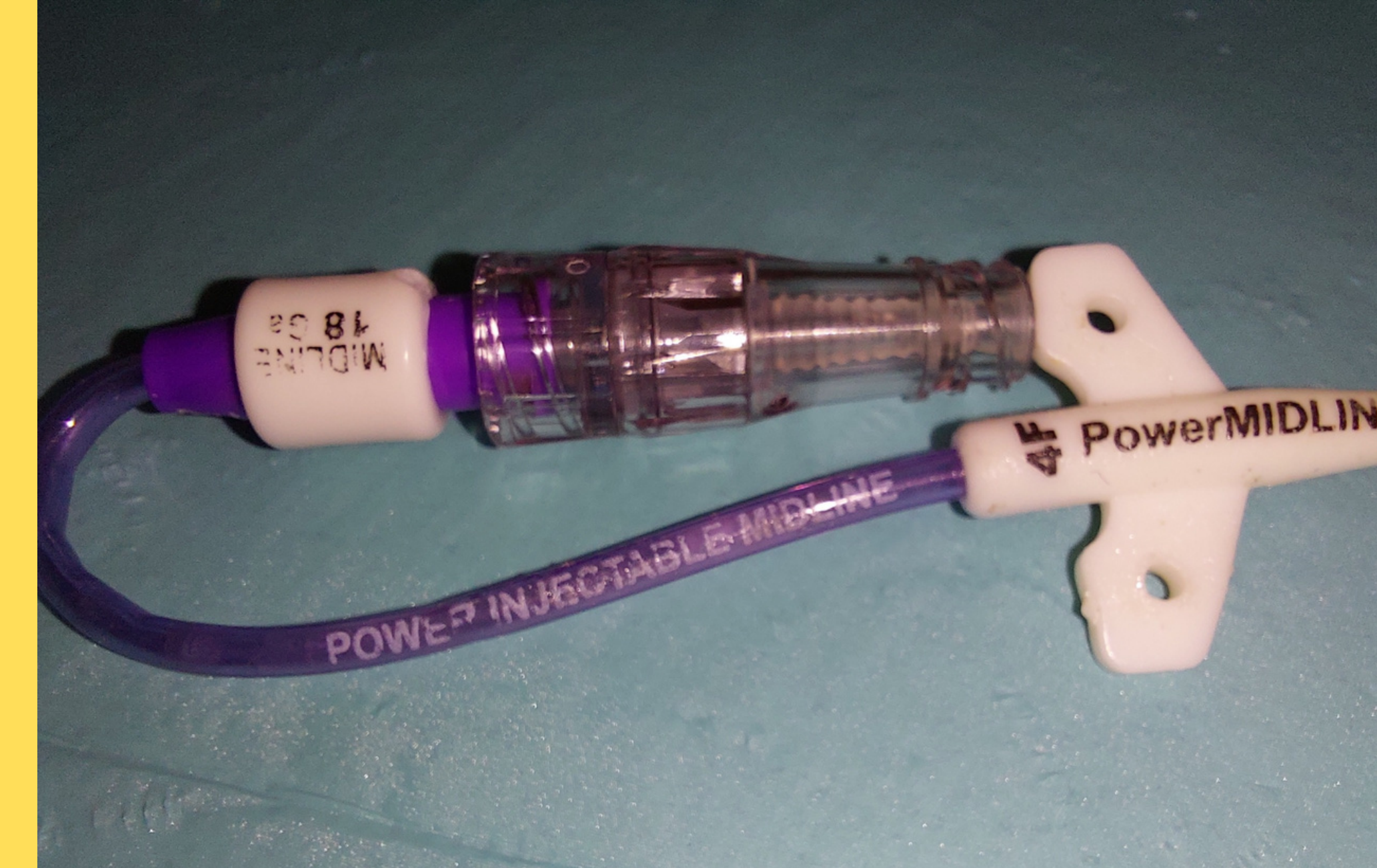




Midline Power Injectable  
in poliuretano

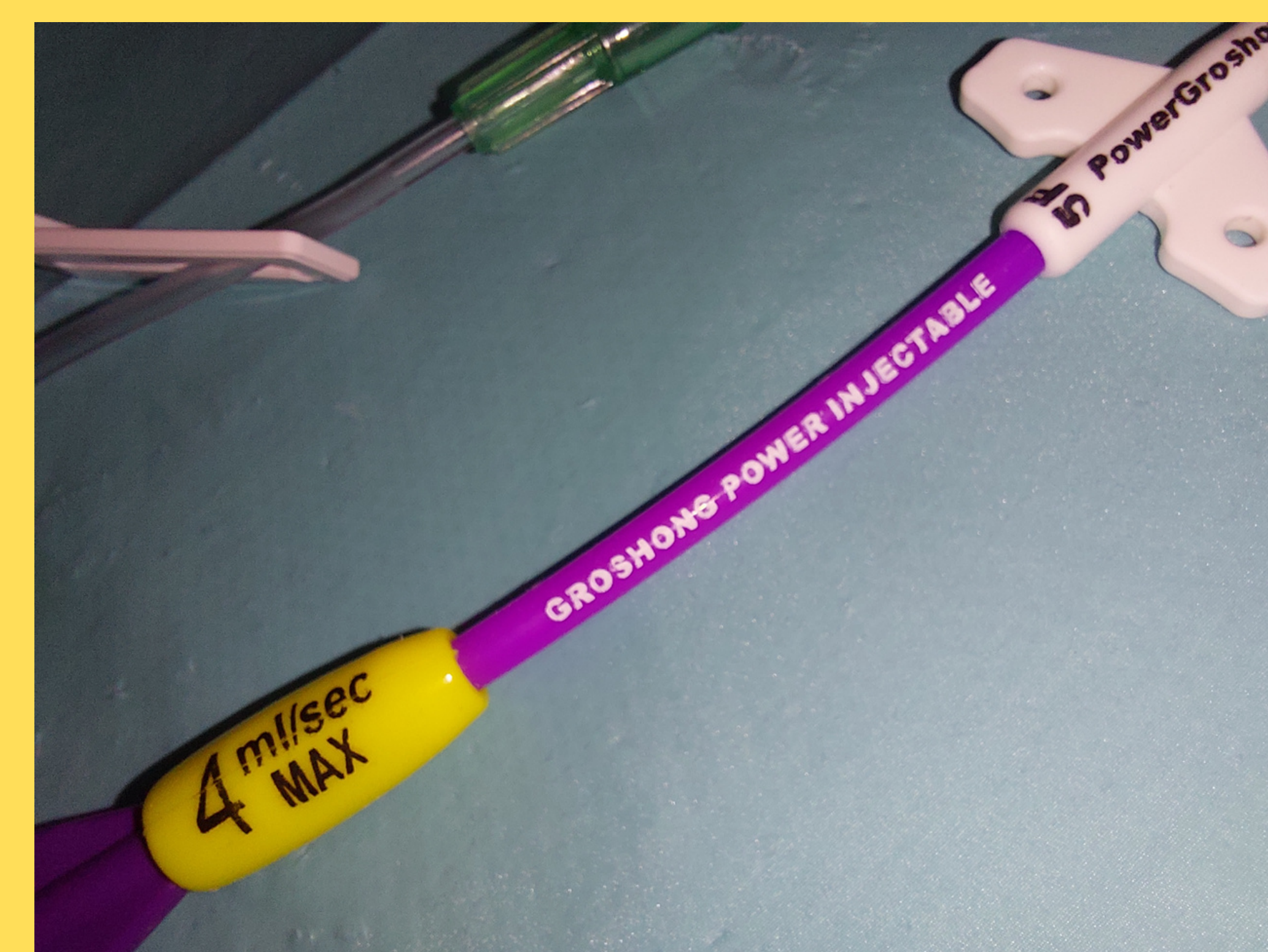

Riconoscibili dalla scritta PowerInjectable, la velocità Max di flusso espressa in ml/s o la pressione Max tollerata espressa in PSI. (Il colore VIOLA non indica che il dispositivo tolleri il MDC)

Il POWER PORT può essere utilizzato per l'infusione di mezzo di contrasto SOLO se si posiziona l'Ago di Huber/Gripper Power Injectable (G19 o G20)

## Dispositivi che NON tollerano il MDC

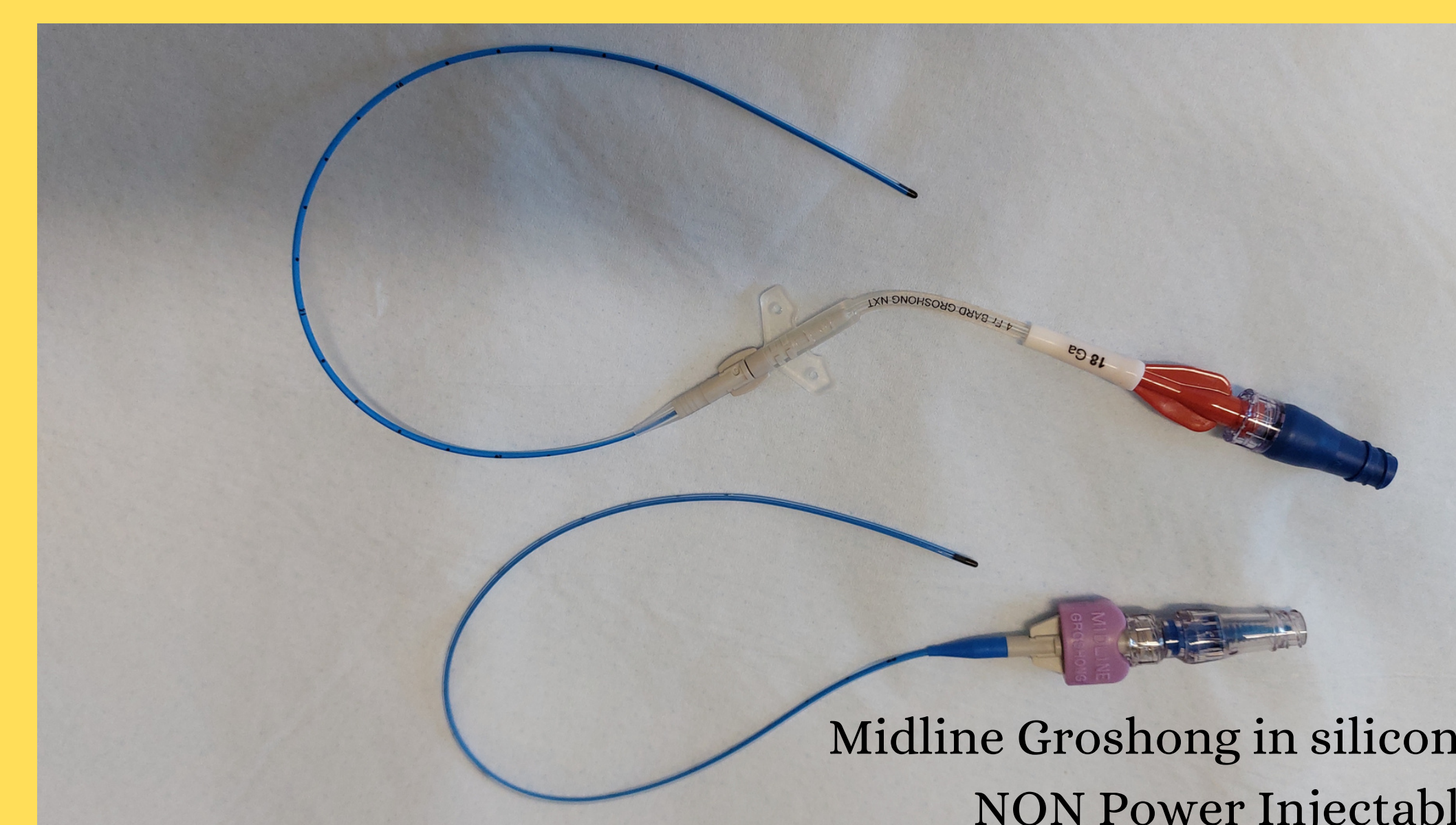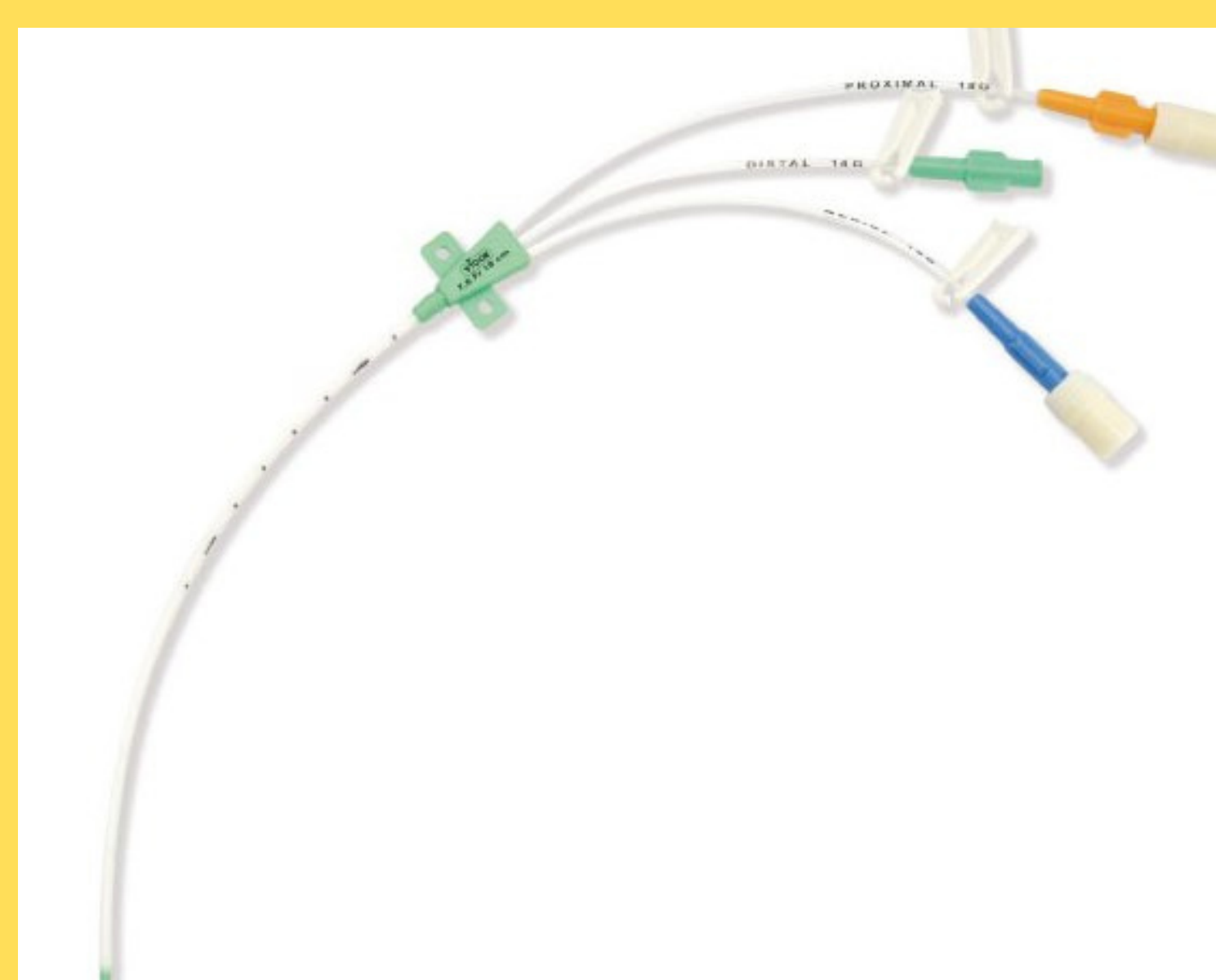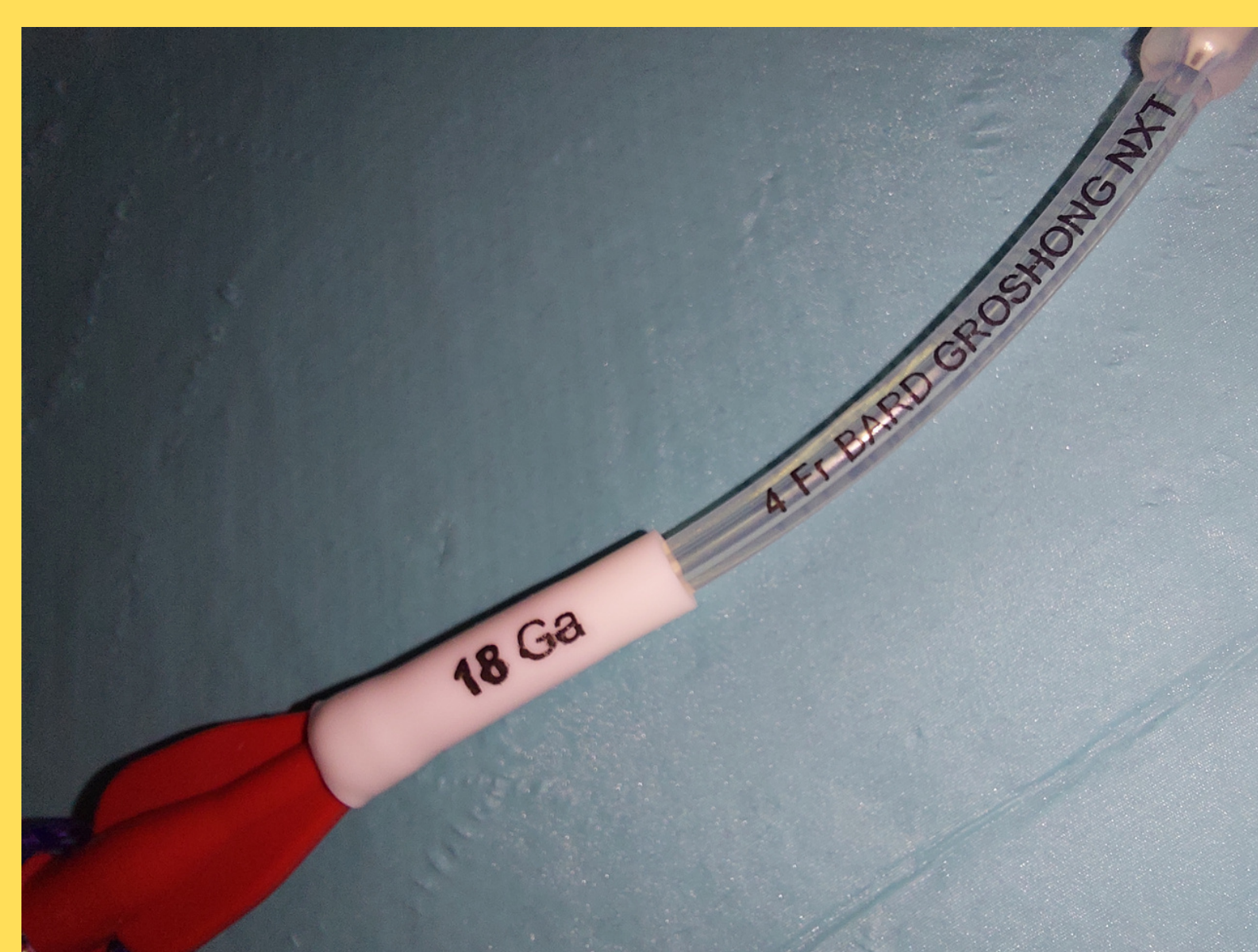

Midline Groshong in silicone  
NON Power Injectable

Non riportano la scritta PowerInjectable, rischiano di danneggiarsi se utilizzati con pressioni elevate (fissurazione, rottura, migrazione, ecc).

**PICC e Midline Groshong in silicone NON possono essere utilizzati!**