

Istruzioni operative per l'invio di campioni relativi alla diagnosi di malattie infettive altamente contagiose.

Di seguito le istruzioni operative su tipologia di campioni, modalità di trasporto, consegna dei campioni diagnostici alla **SC Microbiologia Clinica, Virologia e Diagnostica Bioemergenze dell'Ospedale Sacco di Milano**

Prima di inviare campioni, è necessario contattare il laboratorio.

Il Laboratorio è attivo **h24** tramite il numero di reperibilità della Direzione Medica di Presidio e/o Microbiologia HSacco: 02 3904 4199

Microbiologo di guardia (7/7, ore 08:00 – 20:00): 02 3904 7633

Tipologia di campioni


Saggi	n	Matrici	Contenitori	volume
Test Virologici	1	Tampone Nasofaringeo	Tampone UTM-RT tappo rosso	3 mL
	2	Sangue	Provetta EDTA (PLASMA)	6 mL
	1	Sangue	Provetta senza anticoagulante (SIERO)	6 mL
	1	Urine	Contenitore sterile tappo a vite	5 mL
Ematologia- Chimica Clinica- Coagulazione	1	Sangue	Provetta EDTA per EMOCROMO	3 mL
	1	Sangue	Provetta SODIO CITRATO (coagulazione)	3 mL
	1	Sangue	Provetta Eparina di Litio oppure da Siero (Biochimica-clinica)	3 mL

Unitamente ai campioni è necessario inviare un documento di accompagnamento (in allegato) riportante i dati anagrafici del paziente, il centro richiedente e i riferimenti clinico-epidemiologici rilevanti.

I campioni devono essere inviati nel rispetto delle normative vigenti per il trasporto di materiale biologico potenzialmente infettivo, utilizzando sistema di triplo imballaggio. Il trasporto dei campioni al laboratorio va eseguito secondo le correnti raccomandazioni per il trasporto di campioni a rischio

biologico (riferimento: D.lgs. n° 81/2008 Titolo X (art. 272, comma 2, lettera m); Circolare Ministeriale n° 3/2003 “Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici”; Circolare Ministeriale n° 16/1994 “Spedizione di materiali biologici deperibili e/o potenzialmente infetti”), seguendo il principio del triplo involucro. La spedizione va comunque concordata con il Laboratorio.

Le provette, correttamente chiuse, devono essere inserite in un transbag a tenuta e successivamente collocate in un contenitore secondario rigido e a tenuta stagna, a sua volta inserito in un imballaggio esterno rigido certificato, riportante le etichette previste per il trasporto di merci pericolose.

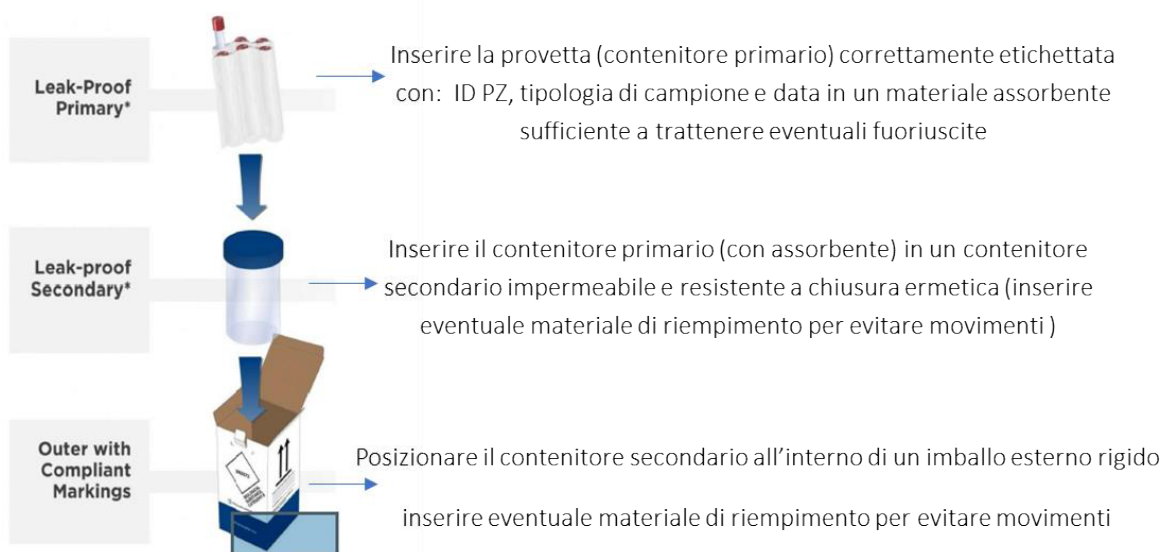

Consegna dei campioni

L'indirizzo a cui inviare i campioni è il seguente:

SC Microbiologia Clinica, Virologia e Diagnostica Bioemergenze

Padiglione 62 – 3° piano

Ospedale Luigi Sacco

Via G.B. Grassi 74, 20157 Milano

Il laboratorio è operativo tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 20:00; per la gestione delle bioemergenze è attiva reperibilità H24, 7 giorni su 7.



REGIONE PIEMONTE

Direzione Sanità

Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare

sanita.pubblica@regione.piemonte.it

prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

Scheda di raccolta dati per la diagnosi di Laboratorio in caso di sospetta infezione da febbre emorragica

ASL/Ospedale_____

COGNOME e NOME _____

SESSO: ☐ Maschio ☐ Femmina DATA DI NASCITA / /

RESIDENZA

Domicilio abituale _____

Recapito telefonico del paziente o di un familiare (facoltativo) _____

DATA INIZIO SINTOMATOLOGIA / /

[illegible]



Direzione Sanità

Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare

sanita.pubblica@regione.piemonte.it

prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

Data di compilazione ____/____/____

Il richiedente (timbro e firma) Recapiti

del richiedente (possibilmente tel. Cellulare) _____